




noorder  
hart excellente  
zorg

MARIAZIEKENHUIS  
INFOBROCHURE



# HOE GEBRUIK JE DE NOVOLIZER?

DIENST Pediatrie

 011 826 341





# Gebruiksklaar maken

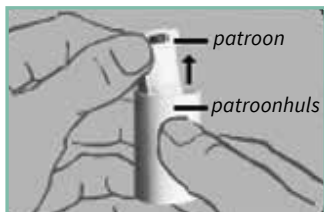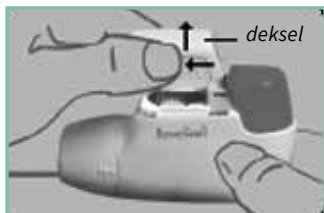



- De Novolizer® is een poederinhalator. Plaats de Novolizer® voor je.
- Druk de geribde vlakken aan beide zijden van het deksel zachtjes samen, schuif het deksel naar voor (←) en til het op.
- Verwijder de aluminiumfolie van de patroonhuls en neem het nieuwe patroon uit de huls. Doe dit alleen vlak voordat je het nieuwe patroon gaat gebruiken. De kleurcodering op het patroon moet rood zijn (zoals de kleur van de drukknop).

## Eerste vulling

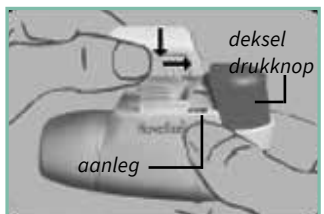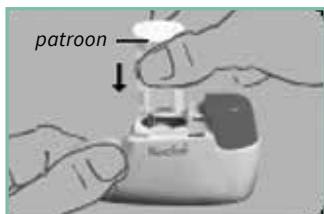

- Plaats het patroon in de Novolizer® met de dosisteller naar het mondstuk gericht.  
**Druk niet op de drukknop terwijl het patroon wordt geplaatst.**
- **Navulling:** Als je de Novolizer® al gebruikt hebt, verwijder je eerst het lege patroon en plaats je vervolgens het nieuwe.
- Zet het deksel weer van bovenaf terug in de zijgeleiders en duw het gelijkmatig in de richting van de drukknop tot het op zijn plaats klikt.

# Inhaleren

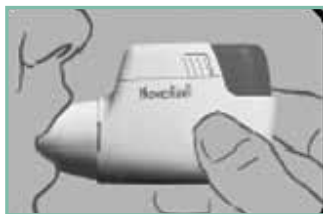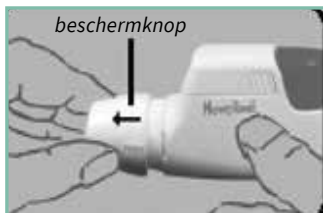

- Verwijder eerst de beschermdop door zachtjes op de zijkant tegelijk te drukken en hem voorwaarts te schuiven in de richting van de pijl.

- Druk de **rode** drukknop volledig in. Je hoort een luide dubbele klik en de kleur van het controlevenster (het onderste) verandert van rood naar groen. Laat de rode drukknop weer los. De kleur **groen** in het venster geeft aan dat de Novolizer® klaar is voor gebruik.

- Adem diep uit (maar NIET in de Novolizer®).
- Plaats je lippen rond het mondstuk. Adem het poeder in met een gelijkmatige, krachtige, diepe en snelle inademing. Tijdens deze inademing moet je een luide klik horen. Houd na de inhalatie je adem 10 tellen in.
- Kijk of de kleur van het controlevenster weer in rood is veranderd.


# Onderhoud




- Doe dit telkens als je een patroon vervangt.
- Verwijder eerst de beschermdop.
- Neem vervolgens het mondstuk vast en draai het eventjes tegen de wijzers van de klok in tot het loslaat. Zo kan je het mondstuk verwijderen (←). Gebruiksklaar maken



- Draai de Novolizer® nu ondersteboven. Neem de losse doseringsschuif vast en schuif hem naar voor en naar boven.
- Eventueel poeder dat is achtergebleven, kan je verwijderen door zachtjes te kloppen.
- Maak het mondstuk, de doseringsschuif en de Novolizer® schoon met een zachte en droge, niet-pluizende doek. Gebruik GEEN water of reinigingsmiddel.

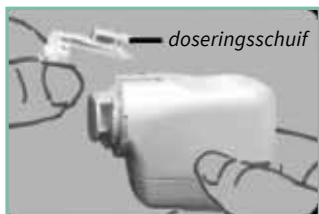

- Bevestig de doseringsschuif door hem onder een hoek naar beneden te schuiven en hem terug op zijn plaats te drukken.
- Draai de Novolizer® weer om.

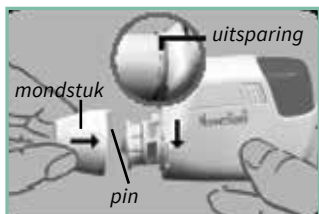

- Bevestig het mondstuk met de pin in de groef aan de linkerkant en draai het naar rechts tot het op zijn plaats klikt.
- Plaats tot slot de beschermdop weer terug.

## Aandachtspunten

- Gebruik een geopend navulpatroon niet langer dan 6 maanden. De Novolizer® zelf moet je jaarlijks vervangen.
- Houd de Novolizer® tijdens het gebruik altijd horizontaal.
- De rode drukknop mag je alleen vlak voor de inhalatie indrukken. Per ongeluk twee keer achter elkaar doseren is niet mogelijk.
- Bewaar je Novolizer® op een droge plaats en houd hem altijd schoon.
- De dosisteller telt af in stappen van 20. Bij het cijfer 20 houd je een nieuw patroon klaar. Bij het cijfer 0 vervang je het patroon.

versie: 7 februari 2022