




noorder
hart excellente
zorg

MARIAZIEKENHUIS
INFOBROCHURE

FOLFUSOR

Daghospitaal

 011 826 300

Folfusor

WAT IS DE FOLFUSOR?

De folfusor is een draagbaar infuuspompje dat uw chemotherapie geleidelijk en aan de juiste snelheid toedient. Deze gedoseerde toediening zorgt voor een optimale werking van de medicatie en beperkt de nevenwerkingen ervan. Deze brochure heeft enkel betrekking op de intraveneuze toediening via een poortkatheter.



Binnenin de folfusor zit een ballon reservoir met de medicatie. Bij het starten van de behandeling kunt u duidelijk zien dat het reservoir volledig gevuld is met een vloeistof. Vanaf het ogenblik dat het pompje in het ziekenhuis wordt aangesloten, zal deze ballon langzaam leeglopen. De inlooptijd kan per behandeling verschillen. De snelheidsregelaar op het uiteinde zorgt ervoor dat de medicatie aan een juiste snelheid gegeven wordt.

U kunt zelf controleren of het pompje aan de juiste snelheid loopt door de grootte van de ballon op te volgen aan de hand van de indicatorlijnen op het pompje. Ook op basis van het gewicht van het pompje kan u dit opvolgen: u kunt het pompje dagelijks wegen met een keukenweegschaal. Het startgewicht van het pompje staat vermeld op het etiket en een leeg pompje weegt 54g.

VOORDELEN VAN DE FOLFUSOR

De folfusor beperkt u niet in het gewone leven van alledag. U kunt deze kleine pomp gemakkelijk in een draagtasje boven of onder uw kleding dragen. Er is bovendien geen latex in verwerkt, waardoor er geen gevaar voor allergie is.

De koker is doorzichtig zodat u de toediening van de medicatie kunt volgen. De folfusor is bestemd voor eenmalig gebruik.

Aandachtspunten


ER IS GEEN TOEDIENING

Het is altijd mogelijk dat om één of andere technische reden de folfusor niet leeg loopt. Het probleem kan te wijten zijn aan de poortkatheter, aan de leiding of aan de folfusor zelf.

Wanneer u problemen ondervindt, neem dan contact op met het daghospitaal of uw thuisverpleegkundige. Buiten de openingsuren van het daghospitaal neemt u best telefonisch contact op met de spoedgevallen via het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis 011 826 000.

Controleer elke dag het volgende:

- Het verloop van de leiding: is er ergens een knik aanwezig die de medicatie kan tegenhouden?
- Is de leiding van de naald vrij doorgankelijk bij de klemmen?
- Ledigt de folfusor zich? U kunt dit nagaan door de folfusor te wegen met een keukenweegschaal of de grootte van de ballon op te volgen.

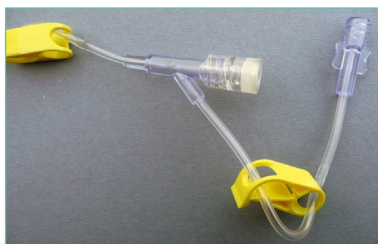

LEKKAGES

Door een onvoorzichtigheid kan de medicatie uit het systeem gelekt zijn. Dit kan gebeuren als de naald of de verbindingsleiding losgekomen is. De gemorste vloeistof kan prikkelend werken voor huid, ogen en slijmvliezen.

Als de infuusvloeistof in contact kwam met uw huid, was de huid dan grondig met water en zeep.

WAT TE DOEN ALS DE NAALD IS LOSGEKOMEN?

Het is belangrijk dat de naald goed gefixeerd zit in de poortkatheter. Daarom wordt een doorzichtig verband en een extra kleefpleister aangebracht.

U moet vermijden dat er plots getrokken wordt aan de leiding. Dat kan gebeuren als de pomp op de grond valt of als u ergens blijft achter haken (deurklink, stoel...). Het kan zijn dat de naald hierdoor gedeeltelijk of volledig loskomt. De medicatie wordt dan niet op de juiste manier gegeven.

Controleer het volgende:

- Is de naald nog op haar plaats? Zit het verband nog op zijn plaats?
- Wordt het verband vochtig? Lekt er vloeistof via de naald?
- Merkt u een natte vlek op uw kleding in de buurt van de naald?
- Voelt u plots jeuk of branderigheid op de plaats van de naald?

Als de naald is losgeraakt, sluit dan de klemmen op de leiding en breng een verband aan over de insteekplaats. Neem bij één van deze problemen altijd contact op en leg uit wat u hebt vastgesteld. Probeer **NOOIT** zelf de naald terug te plaatsen!

WAT TE DOEN ALS DE VERBINDINGSLEIDING IS LOSGEKOMEN?

De leiding van de folfusor en de leiding van de naald zijn aan elkaar bevestigd door een speciale draaiverbinding (Luer-Lock). Zo zit de leiding stevig vast en kan er normaal gezien geen lekkage zijn van de vloeistof. Deze verbinding is goed vastgeplakt met een doorzichtig verband.

Als uw kleding of huid plots nat aanvoelt, controleer dan de leiding en de verbindingen, neem contact op met uw thuisverpleegkundige of het daghospitaal.



Ligt er gemorste vloeistof op de grond, dep ze dan droog met papier (keukenrol). Spoel de plaats waar gemorst werd grondig na met veel water en zeep. Draag hierbij handschoenen en was nadien uw handen grondig.

Gooi het afval niet in de gewone vuilbak, maar in een dubbele, afgesloten plastic zak. **Breng dit afval mee naar het ziekenhuis bij uw volgend bezoek.**

Praktische tips

De folfusor is zo klein dat hij gemakkelijk te dragen is. U kunt de folfusor in het voorziene draagtasje rond de lenden bevestigen.

Let er op dat de leiding mee opgerold is en nergens achter kan haken. Dit voorkomt onverwachte trekkracht op de naald, waardoor ze zou kunnen loskomen uit het membraan van de poortkatheter.

DE HOOGTE

Het is belangrijk dat het hoogteverschil tussen de folfusor en de insteekplaats ongeveer hetzelfde blijft om de inloopsnelheid constant te houden. Overdag draagt u de folfusor best rond uw middel. 's Nachts legt u de folfusor naast u in bed of eventueel onder het hoofdkussen. Leg hem liever niet op uw nachtkastje of op de grond.

DE TEMPERATUUR

Uw lichaamstemperatuur is de beste temperatuur voor de toediening van de medicatie. Daarom wordt de snelheidsregelaar bij voorkeur op de huid gekleefd. Zorg ervoor dat de folfusor geen al te grote temperatuurverschillen ondergaat. In de zomer legt u de folfusor niet in de vlakke zon. Temperaturen boven 38°C zijn te vermijden. In de winter houdt u de folfusor tijdens een wandeling dicht tegen het lichaam aan, want de medicatie is gevoelig voor vrieskoude.

BADEN EN DOUCHEN

Bij het nemen van een bad is het belangrijk dat er geen water aan het verband van de poortkatheter komt. U kunt uit voorzorg een extra plastic verband aanbrengen. Ook de folfusor en de leidingen komen best niet in aanraking met het water. Onderdempeling van de folfusor is niet toegestaan. Leg hem gewoon op een stoel naast het bad.

Douchen wordt afgeraden, omdat de folfusor en het verband droog houden praktisch onmogelijk is.

Afschakelen van de folfusor

DE BENODIGDHEDEN

Het afschakelen moet op de juiste manier gebeuren. U kunt de folfusor thuis laten afschakelen door een thuisverpleegkundige. Zo bespaart u veel tijd.


Het afschakelen van de folfusor is heel gemakkelijk. Ook als de infuus pomp leeg is, blijft de continue druk van de folfusor behouden. Dus moet u de pomp niet onmiddellijk afschakelen.

Het materiaal

- Wegwerphandschoenen
- Spuit van 10 ml
- Optreksnaal
- Een flacon NaCl 0.9% 10 ml
- Hibitane in alcohol
- Steriele kompressen
- Een afdekverband

WERKWIJZE

1. Trek handschoenen aan
2. Trek 10 ml NaCl 0.9% op
3. Ontlucht de spuit
4. Haal de folfusor uit het draagtasje
5. Sluit de 2 klemmen op de leiding van de grippernaald
6. Verwijder het afsluitdopje op de gripper tussen de 2 gele klemmen
7. Plaats de spuit met 10 ml NaCl 0.9% hierop, open de klem het dichtst bij de naald en spuit turbulent in. Turbulent wil zeggen dat men via een “start-stop systeem” met kleine schokkende bewegingen turbulentie veroorzaakt om verstopping te vermijden.
8. Sluit de klem terug
9. Verwijder het verband en daarna de gripper: plaats de vingers rond de basis van de gripper, hef de veiligheidsarm recht uit de vergrendelpositie tot de klik! (“click”). De naald zit nu veilig weggeborgen
10. Ontsmet de insteekplaats en breng een verbandje aan

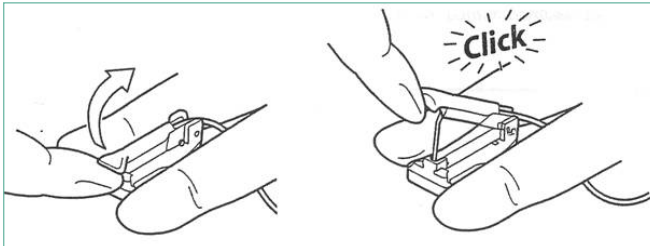

Afvalverwijdering

Laat de gripper aangesloten op de folfusor.

Stop de leiding en de folfusor in een goed gesloten, dubbele plastic zak en breng deze bij de volgende opname mee naar het daghospitaal.

Nooit in de gewone vuilzak gooien!

HET DRAAGZAKJE

Het draagtasje is herbruikbaar. Gedurende de ganse duur van uw therapie is het voor u persoonlijk, breng het dus bij elke opname mee.

Steek het niet bij in de plastic zakken met het lege folfusorpompje.

Controle van de folfusor

Leeg



Vol



Heeft u nog vragen?

Aarzel dan niet om ze te stellen. U kunt het daghospitaal steeds bereiken tussen 8 en 17 uur op het nummer 011 826 300 of u kunt contact opnemen met uw thuisverpleegkundige.

versie: 22 november 2019

Noorderhart vzw
Maesensveld 1
B-3900 Pelt
t 011 826 000
info@noorderhart.be
noorderhart.be