

NOVOLIZER®

DIENST

A2.1 Pneumologie - Endocrinologie

 011 826 351

INSTRUCTIEFILMPJE



www.noorderhart.be/nl/inhalatietherapie

Inleiding

Welkom op de dienst pneumologie. Omwille van een (long)aandoening moet u een of meerdere inhalatiemedicijnen innemen. Deze brochure beschrijft het correct gebruik van uw inhalatiesysteem. U kunt hieronder ook noteren welke inhalatiemedicatie u moet innemen, welke dosis en op welke tijdstippen.


Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel dan zeker niet ze te stellen. Uw behandelende arts of verpleegkundige geeft u graag meer uitleg.

Medicatie- type	Dosering	Frequentie en dosis	Uren				Bij kort- ademigheid
			8 uur	12 uur	16 uur	20 uur	
	... µg	... caps ... x per dag					
	... µg	... caps ... x per dag					
	... µg	... caps ... x per dag					
	... µg	... caps ... x per dag					
	... µg	... caps ... x per dag					
	... µg	... caps ... x per dag					

Voorbeelden: Salbutamol, Budesonide, Formoterol, ...

Eerste gebruik

Als dit een nieuw apparaat is, moet u het voor gebruik eerst klaarmaken door het patroon in de Novolizer® te plaatsen.

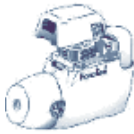

1. Neem de Novolizer® uit de plastic verpakking.
2. Houd het toestel horizontaal.
3. Bovenaan de Novolizer® bevindt zich een klepje. Duw op de geribbelde delen, schuif het klepje naar voor en til het op.
4. Verwijder de beschermfolie van het potje met de vulling.
5. Neem de vulling uit het potje en plaats het in de inhalator (met de dosisteller naar het mondstuk gericht).
6. Plaats het klepje terug op de Novolizer® en klik het vast (door het naar achteren te schuiven).

De Novolizer® is nu klaar voor gebruik.

OPGELET

- Door de houdbaarheid mag het potje met de vulling pas vlak voor gebruik geopend worden.
- Het patroon mag maximum zes maanden na openen gebruikt worden.

Aanbevelingen

- Bewaar de Novolizer® op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Novolizer®.
- De Novolizer® is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.
- Vervang de Novolizer® als het toestel leeg is.

Techniek




1. Neem een rechtczittende houding aan.
2. Neem de dop van het mondstuk door aan weerszijden op de geribbelde delen te duwen.
3. Houd de Novolizer® horizontaal. Druk de rode drukknop volledig in: u hoort een klik en de kleur van het controlevenster verandert van rood naar groen. De Novolizer® is nu klaar voor gebruik.



4. Blijf de Novolizer® horizontaal houden.
5. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
6. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.



7. Sla het hoofd licht achterover.
8. Adem snel en diep in, zodat u een 'klik' hoort die aangeeft dat de dosis vrijkomt. Blijf daarna verder inademen. Bij correcte inhalatie verandert de kleur van het controlevenster van groen naar rood.
9. Houd de adem vijf à tien seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.

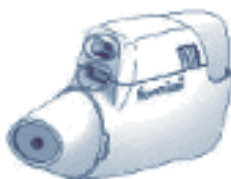

10. Adem rustig uit door de mond.
11. Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap drie tot tien.
12. Plaats de dop terug op het mondstuk.
13. Spoel de mond met water (niet inslikken).

**Met dank aan de Belgische Vereniging voor Pneumologie
Verpleegkundigen (BVPV).
www.bvpv-sbip.be.**

versie: 24 april 2013